

expertの機能はそのままに
チェストピースにアルミを採用した軽量化モデル

focal tone™

expert light

エキスパートライト



軽さを追求することで、
医師や看護師の負担を減らす。

医師や看護師が日々持ち歩く聴診器は、「軽さ」も大切な性能と言えます。聴音効率を落とさずに、より軽く、より使いやすく。医師や看護師の負担を少しでも減らし、医療行為の質を高めることに貢献します。

希望小売価格(税別) | 15,800円

サイズ	全長:77cm、チェストピース径:4.5cm
重量	130g
材質	チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤータップ:シリコン、ノンチルカバー:エラストマー



ダブルヘッド



サスペンデッド
ダイアフラム



フィンガー
シェイプデザイン



アルミニウム製
チェストピース



スムーズフィット
イヤータップ



ロングチューブ
ノンチル



ラテックス
フリー



フィンガーシェイプデザイン

チェストピースをつまむことなく、指二本で挟んでの聴診が可能。聴診のしやすさとともに密着性が格段に高まったことにより、余計な雑音を拾わず、より高い聴音効率を発揮。




スムーズフィットイヤータップ

長時間の装着を前提とし、耳に負担がかかりにくい形状で、素材には非常に柔らかいシリコン製イヤータップを標準装備。滑りをよくするさらさらコーティング加工で耳の穴にスムーズにフィットします。



ノンチルリング

付属のノンチルリングに付け替えることで、低周波音を聴診するベル面としても使用できます。

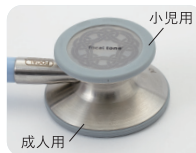

サスペンデッド・ダイアフラム(成人・小児両用)

押さえつける力の強弱により聴音切り替えができ、同一面での連続診察が可能です。



皮膚へ軽く接着すると
低周波(III音・IV音)の聴音。



皮膚へ強く押し付けると、
高周波(I音・II音・心雑音や
呼吸)の聴音。